

# 清洁、消毒可反复使用的设备与器械



## Cleaning and sterilising reusable equipment and instruments - Chinese

**所有用于皮肤穿刺手术的可反复使用的设备和器械，都必须采用可以验证的程序进行清洁、消毒（消毒过程经得起检查），然后才可以重新使用。**

可反复使用的设备和器械的消毒需要在单独的再处理区进行，消毒程序必须尽量减少再污染。下面是一个建议的布局：

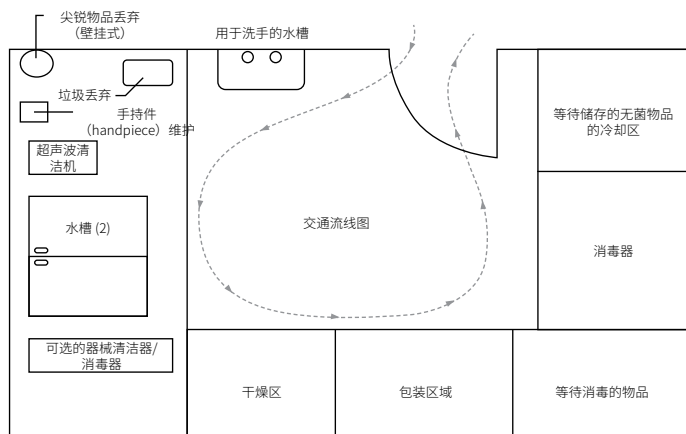


图1: 推荐的消毒区布局 (AS/NZS 4815:2006)

NSW Health经澳大利亚标准有限公司许可，在CLF0722HNSW许可下复制。AS/NZS 4815:2006的版权归澳大利亚标准局和新西兰标准局所有。未经澳大利亚标准局或版权所有者的许可，用户不得复制或反复使用本作品。

## 清洁

- 使用过的设备必须跟所有不干净的设备和器械一起放在再处理区一个单独的区域。
- 将不干净的设备和器械放在清洁池中，在温水中冲洗，以去除所有污染物。
- 在温水中加入治疗用品管理局(TGA)批准的清洁剂，用软刷清洗设备和器械，尽量减少气溶胶。打开剪刀和角质层切割器等设备，清洁所有表面。
- 用流动的温水冲洗设备和器械，并在干燥柜中干燥或用无绒布擦干。设备和器械不应留在再处理区干燥。

- 如果使用超声波清洁器来清洁设备和器械，必须遵循制造商的使用说明。



## 包装

- 确保器械在包装前完全干燥。
- 将每台器械单独放在一个足够大的包装中，以便尽可能打开器械，使蒸汽能够穿透到器械的所有表面。
- 密封包装，用防水毡头笔 (felt tipped pen) 在包装上写上标记。如果您不知道如何包装器械，请参考制造商的说明。可以在包装中放置测试指示物，以确认设备和器械已经用高压消毒器进行消毒。



## 消毒

- 将包装物放到高压消毒器的架子上，请放成单层，不要重叠或接触到消毒器壁。如果设备较多，可能需要分多次消毒。
- 遵循AS/NZS 4815:2006《放在办公室的卫生保健设施：可反复使用的医疗及外科器械与设备的再处理及相关环境的维修》中概述的消毒程序。

- 检查高压消毒器的打印结果，确保时间、温度和压力都正确无误。
- 取出已消毒好的物品，检查是否干燥，包装是否损坏，以及测试指示物是否已变成正确的颜色。



## 储存

- 将已消毒的器械存放在清洁、干燥的地方，避免阳光直接照射。
- 只有在临使用之前才打开器械包装。



## 记录

- 高压消毒器必须有打印设施，能打印下列内容：
  - 每个物品消毒的时间和日期；以及
  - 物品消毒的时间多久，台式高压消毒器的温度和压力多高。
- 消毒记录必须保存12个月，存放的地方必须是安全的，便于查阅，并可由获授权官员检查。

## 进一步的建议

- 联系[地方市政府](#)。
- 打电话 1300 066 055 跟[当地公共卫生部门](#)联系。

## 更多信息

以下资源也可以帮助皮肤穿刺企业和从业人员了解 *Public Health Act 2010*（《2010年公共卫生法》）和 *Public Health Regulation 2022*（《2022年公共卫生条例》）的要求。请访问我们在 NSW Health 网站上的[皮肤穿刺资料](#)页面。

## 情况说明书

- 美容、人体艺术与皮肤穿刺行业
- 怎样清洁、消毒可反复使用的设备与器械

## 标准

- [AS/NZS 4815:2006](#)